


Steg 1: Hur du skapar ett patientkonto

Du kommer att få ett e-mail från din sköterska/läkare med titeln "Din vårdgivare har bjudit in dig till diasend®". Klicka på länken i mailet som säger **Klicka här för att komma igång** och följ sedan stegen här nedanför.

Om du inte har fått någon inbjudan, kan du registrera ett konto på www.diasend.com genom att välja "Sverige" i rullgardinsmenyn och sedan klicka på knappen "Skapa ditt diasend®-konto".

Boendeland

 Sverige

[Skapa ditt diasend®-konto](#)

1 Inloggningsuppgifter

Fyll i din e-postadress, som blir ditt användarnamn, samt ett valfritt lösenord för ditt diasend®-konto. Klicka därefter på "gå vidare" längst ner i höger hörn.

1 2 3 4

Inloggningsuppgifter Patientuppgifter Dela data Bekräfta registrering

Inloggningsuppgifter

E-post * Upprepa e-post *

Lösenord *

2 Patientuppgifter

Fyll i dina personliga uppgifter och klicka sedan på gå vidare.

1 2 3 4

Inloggningsuppgifter Patientuppgifter Dela data Bekräfta registrering

Patientuppgifter

Förnamn * Efternamn * Födelsedag (åååå-mm-dd) *

Adressrad 1 * Kön *

3 Dela data

Om du fick en inbjudan från din vårdgivare via e-mail, så kommer numret med vårdgivarens Klinik-ID redan att vara ifyllt. Detta är din vårdgivares unika id-nummer som gör att du delar din data med dem. Klicka på gå vidare.

Om du inte fick någon inbjudan, kan du lägga till Klinik-ID senare. Slutför registreringen och logga sedan in på ditt konto och gå till fliken Kontoadm.

1 2 3 4

Inloggningsuppgifter Patientuppgifter Dela data Bekräfta registrering

Dela data

Klinik-ID just nu så kan du registrera det senare. Logga bara in i patienten.

**KLINIK-ID
USÖ
12-84703**

4 Bekräfta registrering

Bocka för rutan som säger att du godkänner våra villkor och därmed bekräftar registreringen av kontot. Klicka på gå vidare.

1 2 3 4

Inloggningsuppgifter Patientuppgifter Dela data Bekräfta registrering

Bekräfta registrering

Jag godkänner villkoren för diasend® Personal samt att Diasend AB hanterar mina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att leverera beställd tjänst. Jag vill ta emot information om uppdateringar, inbjudningar till produkttester, nyheter, marknadsföringskommunikation och annan kommunikation som kan vara av intresse för mig.

Var härde du talar om diasend®?
(t.ex. Facebook, Twitter, vdr, vdrsvare, osv.)

5 Ladda ned och installera diasend® Uploader

Installera diasend® Uploader på din PC eller Mac, genom att klicka på relevant ikon. Följ installationsinstruktionerna på skärmen.



1 2 3 4

Inloggningsuppgifter Patientuppgifter Dela data Bekräfta registrering

Tack

Ditt diasend® Personal-konto har nu registrerats.

För att du ska kunna ladda upp din data till ditt diasend® Personal-konto måste du först ha installerat verktyget diasend® Uploader (kommandet) på din dator.

OBS!
Steg 5 och framåt behövs ej om du använder en app t.ex. Libre Link

Behöver du support?

Kontakta oss på sweden@diasend.com eller +46 (0) 31 762 88 88

Steg 2: Hur du överför data till diasend®

1

Starta diasend® Uploader

Dubbelklicka på ikonen för diasend® Uploader på din dator.




2

Anslut USB-kabeln

Anslut kabeln för din mätare/pump till en USB-port på din dator.

OBS! För att överföra data från en Omnipod® PDM till en Mac-dator som är tillverkad tidigare än mitten av 2012, och som kör OS X El Capitan, rekommenderar vi att du använder en USB hub.

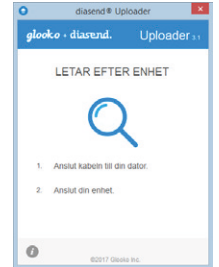


3

Anslut din mätare/pump

Anslut din mätare eller pump till USB-kabeln, eller placera den framför en IR-dongel.


OBS! För mer specifika instruktioner om hur du överför data från din mätare eller pump, vänligen använd vår diasend® Personal Quickguide som finns på support.diasend.com.

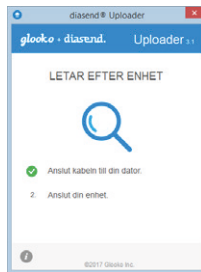

4

Överföringen påbörjas


Vänligen vänta tills överföringen är helt klar innan du kopplar från eller flyttar din mätare/pump.

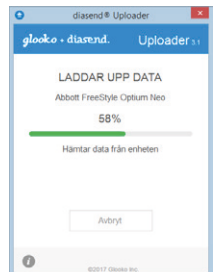

5

Bekräfta dina kontouppgifter


Fyll i dina användaruppgifter (fullständig e-postadress och det lösenord du valde när du skapade ditt konto). Klicka på Validera.

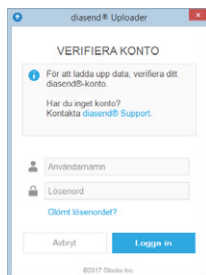

6

Se datan i tabeller och grafer

Logga in på www.diasend.com, genom att först välja svenska som språk och därefter fylla i dina användaruppgifter.

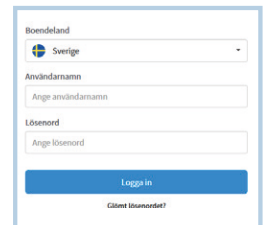

Exempel på rapporter och grafer

